

Buschは1905年に歯科用バーの工場として設立されました。以来100年にわたり、厳選した鋼材、最新技術を使用した設計によりバーを開発し続け、世界中で販売しています。カーバイドバー、ダイヤモンドバーは、パイオニア的な業績です。



Busch[®]



キャンペーン期間:2021年9月20日まで

There is no substitute for quality

BUSCH & CO. GmbH & Co. KG

世界のBuschをお試しいただくための 特別価格 キャンペーン


キャンペーン価格はお取引ディーラー様へお問い合わせください

カーバイドバー CA用

1SXM 1SXM-L



1SXM 1SXM-L (ロングタイプ)

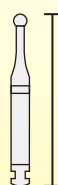

長さ:22mm
入り数:各6本入り
定価:4,420円(税別)



長さ:26mm
入り数:各2本入り
定価:2,020円(税別)

■ 軟化象牙質をスムーズに除去


低発熱・低速・低振動による歯髄への影響が軽減されます。

■ ミニマルインターベーションをサポート

■ ロングタイプはマイクロスコープ下での根管治療時の天蓋除去におすすめです

「ストレスを感じない切れの良さ」「オートクレーブ滅菌に強い」と、臨床でも好評です。術部も見える極細ネックと、切削振動を抑えた患者様に優しい設計により、ブレがなく的確に術部へアプローチします。健全歯質の削除を最小限にすることができるカーバイドバーです。

NEW 1SXM-L ロングタイプに012, 016, 021が追加されました

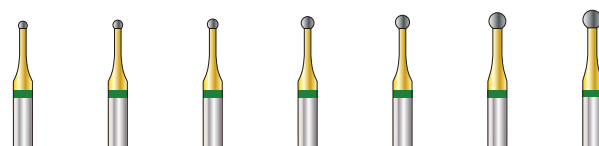

ISO Ø	010	012	014	016	018	021	023
1SXM	●	●	●	●	●	●	●
1SXM-L	●	●	●	●	●	●	●
メーカー推奨 回転数 (min ⁻¹)	1,400 ~2,950	1,250 ~2,800	1,000 ~2,500	750 ~2,050	550 ~1,650	500 ~1,300	500 ~1,100

アソートメントキット



包装:各サイズ1本入(計11本)

■ 1SXM CA用:010, 012, 014, 016

■ 1SXM-L CA用:010, 012, 014, 016, 018, 021, 023

定価:14,700円(税別)

■ 1SXM/1SXM-L(計11本入)と

ステリセーフ バースタンドがセットになります。

■ ステリセーフ バースタンドとは

- 独自のウェーブ構造によりFGバーとCAバー兼用バースタンドを実現しました。
- オープンデザインにより薬液や温度が隅々までいきわたり、高い滅菌効果があります。
- 医療用レジンを使用、繰り返しの滅菌にも高い耐久性があります。
- 裏面にシリコンの滑り止めがついているので滑りやすい面でも安定します。
- ロック機能付きのふたで移動時にバーが飛び出る心配がありません。

ステリセーフ バースタンドは、単体での販売も行っております。定価:4,970円(税別)

ブッシュ リムーバルバーシリーズ

どんな材料もこの2種類だけで
スムーズな除去が可能です

	貴金属	ノンプレシャス合金	レジン	ポーセレン	ジルコニア
ブッシュ カーバイドバー 34D/36RDL/38RDL	◎	◎	◎	×	×
ジラマントバー 6831RZ/6880Z	×	×	×	◎	◎

※ジラマントバー 6831RZは穿孔用です。

ブッシュ カーバイドバー FG用

クラウンリムーバル用 カーバイドバーFG

34D-012

入り数:各6本入り
定価:6,500円(税別)

36RDL-012

入り数:各6本入り
定価:6,500円(税別)

38RDL-010

入り数:各2本入り
定価:2,300円(税別)

38RDL-012





入り数:各2本入り
定価:2,300円(税別)

■1本で3役

口腔内に装着されたクラウンの素材には貴金属やノンプレシャス、レジン、セラミック、ジルコニアが使用され、撤去の際にはそれぞれの素材に適したリムーバルバーが必要とされます。ブッシュ カーバイドバーFG用34D、36RDLはダイヤモンドカットなので貴金属とノンプレシャスだけでなくレジンもまわりつくことなくスムーズにカットでき、レジン前装冠の除去もこれ一本で可能です。

■強固

34D、36RDL、38RDLはヘッドとシャングが一体なのでヘッド部をロウ着した一般のカーバイドバーと比較してヘッドが折れにくく強固です。1本で複数のクラウン除去に使用することができます。

製品名	ブッシュ カーバイドバー		
	34D	36RDL	38RDL
形態			 
ISO	012		
ISO			010 012
カット / ダイヤモンド粒子	ダイヤモンドカット		
作業長	2mm	5.6mm	
最大径	1.2mm		
使用上の注意	発熱を抑えるために断続的に切削してください		
シャング	FG		
推奨回転速度	180,000~200,000 rpm 5倍速エンジン推奨		
入数	各6本		各2本

ジラマント ダイヤモンドバー FG用

表面 拡大写真

側面 拡大写真

ジルコニアクラウンの穿孔

ジルコニアクラウンの除去

6831RZ

入り数:各2本入り
定価:2,800円(税別)

6880Z



入り数:各2本入り
定価:2,800円(税別)

■ダイヤモンドの剥離を減少

特殊なボンディング層でダイヤモンド粒子をしっかりと固定。

■スムーズな切れ味が持続

大きさの違うダイヤモンド粒子を高密度に蒸着。ジルコニアやプレスセラミックのような硬い補綴物もスムーズに切削。

製品名	ジラマントダイヤモンドバー	
	#6831RZ	#6880Z
形態		
ISO	014	
カット / ダイヤモンド粒子	コース+レギュラー(91~151μm)	
作業長	4mm	6mm
最大径	1.4mm	
使用上の注意	発熱を抑えるために断続的に切削してください	
シャング	FG	
推奨回転速度	140,000~160,000 rpm 5倍速エンジン推奨	
入数	各2本	

販売名: ブッシュカーバイドバー 分類: 一般医療機器 一般的名称: 歯科用カーバイドバー 医療機器届出番号: 13B1X00004000062
販売名: ジラマントダイヤモンドバー 分類: 一般医療機器 一般的名称: 歯科用ダイヤモンドバー 医療機器届出番号: 13B1X00004000211

製造販売元

 **東京歯科産業株式会社**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5
TEL:03-3831-0176 FAX:03-3835-8254
E-mail:main@tokyodental.co.jp
http://www.tokyodental.co.jp

■名古屋営業所
■大阪支店
■九州支店

お問い合わせ先