



Bush®

There is no substitute for quality

ジルコニアやニケイ酸リチウムセラミックスの
除去、穿孔にお迷いでは？



新製品

ドイツ製のブッシュなら、2本のダイヤモンドバーで解決です！

ジラマントダイヤモンドバー FG用

ジルコニアクラウンの穿孔

#6831RZ



ジルコニアクラウンの除去

#6880Z



東京歯科産業株式会社



ジラマントダイヤモンドバー FG用 #6831RZ #6880Z


ジルコニアやプレスセラミックの除去、穿孔に適したダイヤモンドバーが開発されました。

信頼のBusch社製品

高品質のカーバイドバーで定評のドイツBusch社製品。



側面 拡大写真

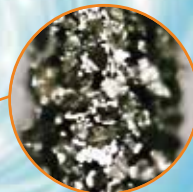

表面 拡大写真

ダイヤモンドの剥離を減少

特殊なボンディング層でダイヤモンド粒子をしっかりと固定。

スムーズな切れ味が持続

大きさの違うダイヤモンド粒子を高密度に蒸着。ジルコニアやプレスセラミックのような硬い補綴物もスムーズに切削。

製品名	ジラマントダイヤモンドバー	
	#6831RZ	#6880Z
ISO	014	014
ダイヤモンド粒子	コース+レギュラー (91~151μm)	
作業長	4mm	6mm
最大径	1.4mm	
全長	19mm	
使用上の注意	発熱を抑えるために断続的に切削してください	
シャンク	FG	
カラーコード	ブルー+グリーン	
軸色	シルバー	
推奨回転速度	140,000~160,000 rpm	
入数	各2本	
分類	一般医療機器	
医療機器届出番号	13B1X00004000211	
一般的名称	歯科用ダイヤモンドバー	

2018.11改訂 第2版

製造販売元

東京歯科産業株式会社

〒101-0021
東京都千代田区外神田6-10-5
TEL:03-3831-0176 FAX:03-3835-8254
E-mail:main@tokyodental.co.jp
http://www.tokyodental.co.jp

■名古屋営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビル13階
■大阪支店 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4丁目4-11 船場西KIDビル2階
TEL:06-6251-5624
■九州支店 〒812-0028 福岡市博多区須崎町4-23
TEL:092-281-5625